

**Quando Precisión,
Sensibilidad
y Rapidez
son Cruciales.**

Rápido
Sensible
Exacto



QuPID[®] y QuPID[®] Plus

La prueba de Embarazo de un solo paso, con la mejor visibilidad de lectura.



STANBIO
LABORATORY

QuPID® y QuPID® Plus – La prueba de Embarazo de un solo paso, donde el resultado se ve claramente.

- **Mayor sensibilidad** – Detecta 20 mIU/mL hCG ó mas en ambas pruebas de suero u orina.
- **Velocidad** – Los resultados positivos pueden ser leídos en tan solo 10 segundos.
- **Exactitud:** >99%, **Especificidad:** >99%
- **Mucho más fácil de leer** – Un fondo más claro que asegura una lectura de resultados facilmente, aún con muestras de bajo nivel.
- **Controles de procedimiento positivo y negativo integrados** – Aseguran

un correcto funcionamiento de la función del reactivo y del método de prueba.

- **Color distintivo** – Hace que el dispositivo tanto para orina como suero-orina, sean muy fáciles de diferenciar.
- **Instrucciones para la prueba más simples**, impresas en cada envoltura.
- **Comodidad** – Gotero para la muestra desechable incluido en cada dispositivo.
- **Se almacena a temperatura ambiente.**
- **Estatus Clia: No requerido** (Muestras de orina)

QuPID® Plus hCG (Muestras de suero u orina)



25 Pruebas – Cat. #1230-025 50 Pruebas – Cat. #1230-050

QuPID® hCG (Muestras de orina solamente)



25 Pruebas – Cat. #1220-025 50 Pruebas – Cat. #1220-050

QuPID® Plus E.R. hCG (Muestras de suero u orina)




25 Pruebas – Cat. #1250-025 50 Pruebas – Cat. #1250-050

Sensibilidad de 10 mIU/mL

Procedimiento de la prueba en general:

1. Remueva el dispositivo y el gotero desechable de su bolsa de envoltura.
2. Marque en el dispositivo el nombre del paciente ó un número de control.
3. Vierta unas gotas de la muestra en la perforación redonda del dispositivo. (Vea la ilustración).
4. Lea el resultado como un positivo ó un negativo.

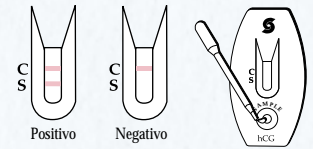

QuStick® Plus hCG (Muestras de suero u orina)



100 Pruebas – Cat. #1215-425


QuStick® hCG (Muestras de orina solamente)



100 Pruebas – Cat. #1210-425

La Prueba inmunológica mas económica de Stanbio.

- **Sensibilidad** – 20 mIU/mL hCG
- **Sencillez** – Solo sumerja la tira en la muestra.
- **Rápida** – Resultados positivos en tan solo 30 segundos.
- **Conveniencia** – Cuatro tubos re-sellables de 25 tiras cada uno.

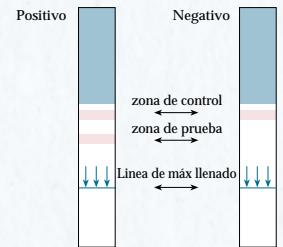

Para mayor conveniencia y para usarse con estos ensayos, hay a su disposición controles de orina de 2 niveles y de suero de 3 niveles.

Juego de control hCG orina de 2 niveles - Líquido listo para usarse (Positivo, Negativo)

2 x 5 mL

Cat. No. 1225-205

Juego de control hCG suero de 3 niveles - Líquido listo para usarse (Positivo bajo, Positivo alto y Negativo)

3 x 5 mL

Cat. No. 1235-305



Prueba Fertitell hCG

Prueba de látex directa en placa.

- **Rápida** – Resultados en 2 minutos
- **Sensible** – 0.2 IU/mL hCG
- **Específico** – Para sub-unidad beta

100 Pruebas – Cat. #1100-100



Prueba Quicktell hCG

Prueba de látex indirecta en placa. (Monoclonal)

- **Rápida** – Resultados en 2 minutos
- **Sensible** – 0.3 IU/mL hCG
- **Específico** – Para sub-unidad beta

100 Pruebas – Cat. #1180-100

Para ordenar ó para más información, llame en USA sin costo al 1-800-531-5535 ó al (210) 222-2108
Stanbio Laboratory • 2930 East Houston Street • San Antonio, Texas USA 78202 • Fax (210) 227-6367 • e-mail: stanbio@netxpress.com ó visitenos en el internet: www.stanbio.com

DISTRIBUIDO POR:



STANBIO
LABORATORY

Avanzando la Ciencia de Diagnóstico Clínico

Química Clínica/Química Especial/Embarazo/Serología/Microbiología/Hematología/Sangre Oculta/Tiras de Orina/Hemoclasificadores/Detergentes/Analizadores/Pipetas